



BENEFICIOS DE HUMIPAK



1. Contención de materiales biopeligrosos

- Instrumentos sucios sellados de forma segura dentro de la bolsa
- Sin exposición al personal ni al público
- Transporte seguro a través del hospital, entre unidades y en vehículos
- Ninguna dispersión de bacterias durante el transporte



2. No se necesitan productos químicos

- Todo lo que se necesita es agua. No es necesario rociar espumas o aerosoles enzimáticos sobre los instrumentos antes de colocarlos en la bolsa.
- Las proteínas, los priones y todos los residuos móviles de los instrumentos usados aerosoles, espumas y geles.



3. Ahorre tiempo y dinero

Pasos sencillos de utilizar

- Agregue la cantidad correcta de agua a la bolsa
- Inserte el instrumento o la bandeja en la bolsa
- Cierre la bolsa con la tira autoadhesiva



4. Impacto ambiental

Humipak tiene un menor impacto ambiental que los procesos actuales debido a:

- Menos uso de agua
- No se vierten productos químicos en el sistema de agua principal
- No se liberan productos químicos al medio ambiente
- Menor consumo de electricidad ya que no es necesario volver a lavar los instrumentos




5. Reducir el tiempo de limpieza en un 70%

- Reduce el tiempo de limpieza previa manual o la hace innecesaria
- No hay productos químicos que enjuagar antes de limpiar
- No es necesario fregar los instrumentos. Solo enjuaga
- Reducción de las tasas de relavado
- Reduce la posibilidad de pérdida de instrumentos
- Reduce el riesgo de daños a instrumentos delicados así como el desgaste

TAMAÑOS ESPECIALIZADOS DISPONIBLES

¡Ahora disponible para brazos robóticos!

Gama HUMIPAK®			
CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO(MM)	CANTIDAD DEL PAQUETE
HPSSR01	Brazo robótico único	210 x 815	100
HPSSR02	Robótico 2 brazos	240 x 815	100
HPSSR04	Robótico 4 brazos	420 x 815	100
HPSSR05	Robótico 5 brazos	510 x 815	100
HPSS5667	Endoscopias	560 x 670	100
HPSS2035	Bandeja pequeña	200 x 350	100
HPSS4243	Medio DIN	420 x 430	100
HPSS4267	DIN completo	420 x 670	100
HPSS6577	Doble DIN	650 x 770	50

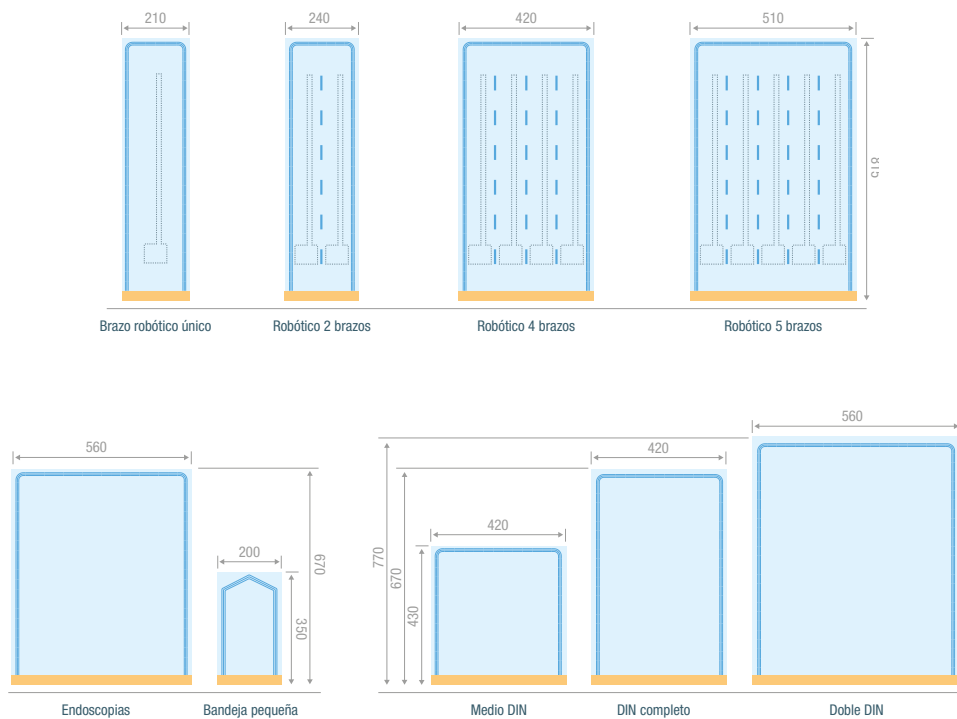


HUMIPAK no está destinado a la esterilización
HUMIPAK no es un Sistema de Barrera Estéril



WESTFIELD MEDICAL
Second Avenue, Westfield Trading Estate
Midsomer Norton, Somerset, BA3 4DP
T +44 (0)1761 408800 - E sales@westmed.co.uk
www.westmed.co.uk

GRUPO STERIMED, soluciones completas para:

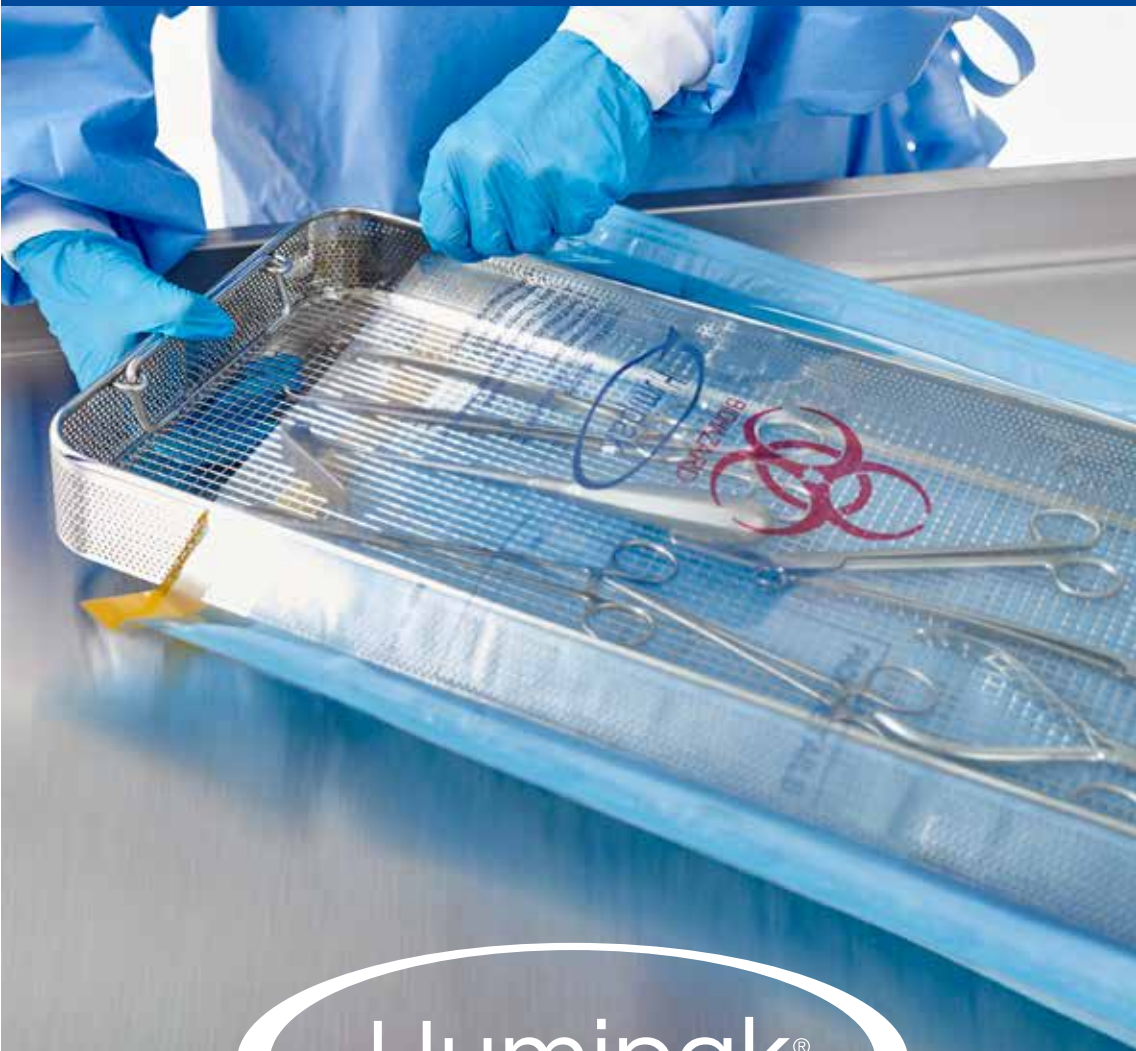

BOLSA DE RETENCIÓN DE HUMEDAD HUMIPAK

Bolsas postoperatorias de nueva generación diseñadas de forma innovadora para facilitar procesos de limpieza y descontaminación.



- Inhibe las proteínas que se adhieren a los instrumentos quirúrgicos después de la operación.
- Contención de instrumentos sólidos y peligrosos.
- Facilita el transporte seguro desde el quirófano al departamento de servicios de esterilización.

IMPULSE LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA DE
SU DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTÉRILES

HUMIPAK®

BOLSA DE RETENCIÓN DE HUMEDAD




HUMIPAK® tiene como objetivo reducir las infecciones asociadas a la atención sanitaria (HCAI) manteniendo los instrumentos en condiciones húmedas que mantienen la suciedad en un estado blando, facilitando, los procesos de limpieza y descontaminación más rápidos sin productos químicos de pretratamiento.



HUMIPAK® CÓMO FUNCIONA

- El secado de las proteínas comienza dentro de los 15 minutos posteriores al uso del instrumento
- La capa absorbente permite la dispersión del agua sobre una gran superficie y crea niveles de humedad estables
- Una vez sellado, el aire dentro del Humipak comienza a recoger moléculas de agua de la capa absorbente, aumentando la humedad hasta que se alcanza el equilibrio entre las moléculas de agua en el aire y en estado líquido
- Las capas de película permiten la transmisión de vapor de agua sólo 8 g.m²/día manteniendo el contenido húmedo hasta por 7 días

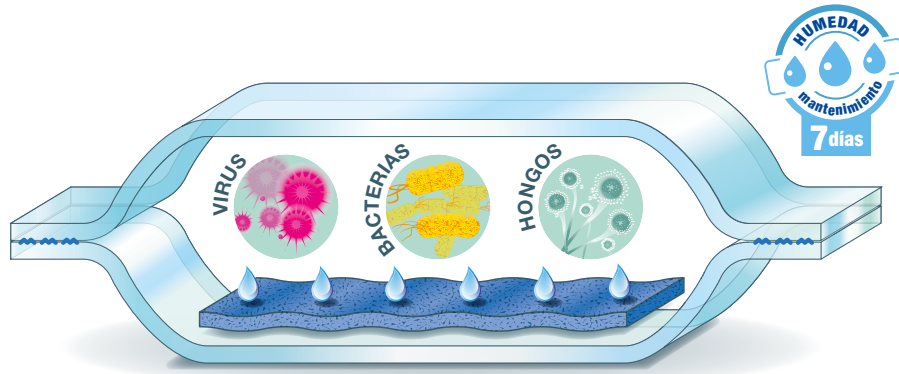


- Fabricado con películas de poliéster/ Polipropileno con un revestimiento interior de viscosa azul altamente hidrófilo.
- Cierre de la bolsa logrado con cinta autoadhesiva sensible a la presión




- Todos los materiales de grado médico
- Logotipo de HUMIPAK®, instrucciones de uso, número de lote, detalles de Westfield y símbolo de riesgo biológico impresos en la bolsa
- No está destinado a la esterilización – HUMIPAK® no es un Sistema de Barrera Estéril

INSTRUCCIONES DE USO

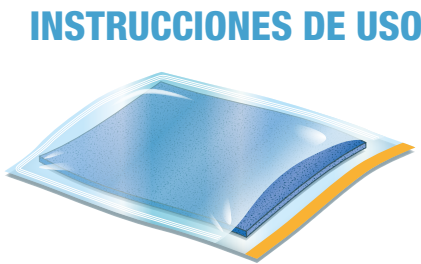

PASO #1: Seleccione el tamaño de la bolsa

Elija entre nuestra gama de tamaños para instrumentos pequeños, Cestas DIN, endoscopios y brazos robóticos. Situar el instrumento sobre la bolsa como guía para saber qué tamaño usar.

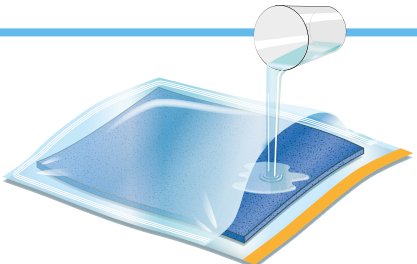


PASO #2: Agregue agua a la bolsa

Este es el paso más importante. No agregue más de la cantidad de agua recomendada a la bolsa.



PASO #3: Coloque los artículos en la bolsa

Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del artículo para que el sello se cierre correctamente. La zona de sellado debe quedar plana.

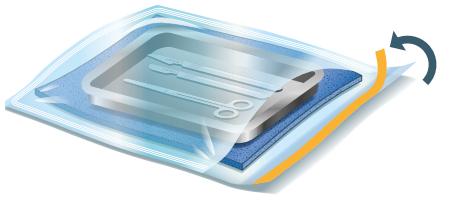

PASO #4: Selle la bolsa

Retire la tira amarilla y selle suavemente la bolsa de un extremo a otro.

CUMPLIMIENTO

Humipak cumple con los requisitos de HTM01-01, WHTM 01-01 y SHTM 01-01. Fabricado bajo ISO 9001 e ISO 1348. Patentes concedidas: Australia 2011244793; ChinaZL 201180031188,0; Europa 2563262; Malasia MY-164539-A; Estados Unidos 9.254.176 y 9.610.128

BENEFICIOS

